

力強さと繊細さがアップデート！4つのもみ玉で全身マッサージ
「マイリラ マルチマッサージャー R23 MRL-M2」
～2024年3月16日発売～

美と健康の総合メーカー、株式会社フジ医療器（本社：大阪市中央区）は、力強さと繊細な動きでマッサージを行う当社独自機構「極つかみメカ」を搭載し、首肩用ベルトの使い分けと充電式のコードレスによりお好きな場所で全身をケアできるマッサージャー「マイリラ マルチマッサージャー R23 MRL-M2」（以下、MRL-M2）を2024年3月16日に発売します。



ネイビー(NB)



ブラック(BK)

マイリラ マルチマッサージャー R23 MRL-M2

このたび発売する「MRL-M2」は、当社の独自機構である「極つかみメカ」による人の手のような心地よい力強さと繊細な動作で、全身を部位ごとにケアすることができるマルチマッサージャーです。

新搭載の「極つかみメカ」には、大きな突起が滑らかに回転しながらほぐす「回転つかみもみ玉」と、弾力のある素材を使用した突起でほぐす「粘りつかみもみ玉」をそれぞれ上玉と下玉に2つずつ採用しています。計4つのもみ玉でもみこむことで、メリハリのあるマッサージを実現しました。

また、首肩用ベルトを脱着することで部位ごとにマッサージがしやすくなる「フリースタイル機構」を採用しています。首・肩・背中・腰のマッサージには首肩用ベルトを使用し、腕・太もも・ふくらはぎにはベルトを抜き取ることで、部位ごとに合わせた使い方ができます。充電式ですのでコードを気にすることもなく、お好きな場所で快適なマッサージをお楽しみいただけます。

フジ医療器お問い合わせ先

＜報道関係の方＞
株式会社フジ医療器

マーケティング部 Tel:06-4793-0611(代表)

＜お客様＞

フジ医療器お客様相談窓口 【フリーダイヤル】0120-027-612


<製品特長>

(1) 粘りのあるつかみマッサージを実現した「極つかみメカ」搭載

本商品より搭載した独自機構「極つかみメカ」には、上玉に大きな突起が滑らかに回転しながらほぐす「回転つかみもみ玉」、下玉には弾力のある素材を使用した突起でほぐす「粘りつかみもみ玉」を2つずつ採用しています。計4つのもみ玉でもみこむことにより、メリハリのあるマッサージを実現しました。人の手のように上下からつかむ力強さと繊細さをイメージした動作で、疲れた部位にしっかりアプローチします。

もみの動きや速度を組み合わせた自動コースは3種類(複合つかみもみ、交互つかみもみ、同時つかみもみ)を搭載しています。また、交互つかみもみと同時つかみもみのもみ技では、手動で2段階の速度調節が可能です。

さらに、回転つかみもみ玉(上玉)にはヒーターを搭載しているので、じんわり温まりながら心地よいマッサージをお楽しみいただけます。

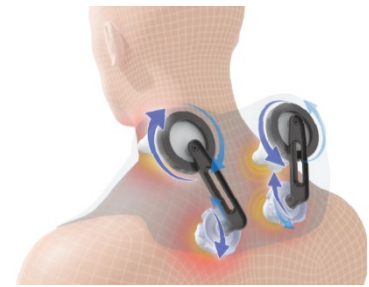


[NEW] 極つかみメカ



[NEW] 交互つかみもみ



同時つかみもみ

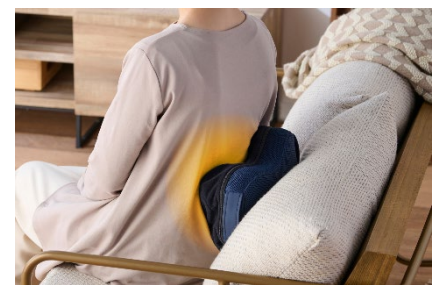

もみ玉ヒーターを搭載

(2) 首肩ベルトの使い分けで全身をマッサージできる「フリースタイル機構」

本体には脱着可能な首肩用ベルトを採用しており、自在な使い方でのマッサージをお楽しみいただけます。首・肩・背中・腰のマッサージには首肩用ベルトを使用し、腕・太もも・ふくらはぎにはベルトを抜き取ることで、部位毎にフィットしやすい専用マッサージャーとして使い分けができます。

電源コードを気にせず使える充電式ですので、好きな場所で快適なマッサージをお楽しみいただけます。もみ玉カバーはファスナー式で簡単に取り外して手洗いができますので、いつでも清潔に保つことができます。



※写真・イラスト・CG は全てイメージです。

<仕様>

販売名	マルチマッサージャー R23
品番	MRL-M2
愛称	マイリラ
メーカー希望小売価格	オープン価格
カラーバリエーション	ネイビー(NB)、ブラック(BK)
寸法	本体:幅 約 27.5× 奥行 約 14× 高さ 約 16cm(ベルト部分除く) 首肩用ベルト:幅 約 8× 長さ 約 148cm
質量	約 2kg(AC アダプター含まず)
定格バッテリー	リチウムイオン電池 DC9.6V 1800mAh
定格時間	20 分
定格入力(消費電力)	30W(待機電力:0.5W)
定格電動機消費電力	25W
定格電熱器消費電力	5W
充電所要時間	最大 140 分
電池持続時間	約 70 分(無負荷時)
充電回数	約 500 回
アダプター定格	入力:AC100V 50/60Hz 0.7A 出力:DC12V 2A
付属品	AC アダプター(MRL-M2 専用 型番:IVP1200-2000P)
もみ回数	遅:約 15 回/分 速:約 20 回/分
オートタイマー	約 10 分
張地	本体カバー・首肩ベルト:ポリエステル、PVC もみ玉カバー:ナイロン
使用環境温度	0°C～ 45°C
ヒーター温度(めやす)	38°C以下
医療機器認証番号	305AHBZX00051000(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)
使用目的または効果	あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 疲労回復／血行をよくする／筋肉の疲れをとる／ 筋肉のこりをほぐす／神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

●「マイリラ」はフジ医療器の登録商標です。

<フジ医療器 会社概要>

社名	株式会社フジ医療器
代表取締役会長兼社長	呉 旭亞 (Alex Wu)
本社所在地	大阪府中央区農人橋 1 丁目 1 番 22 号 大江ビル 14 階
事業内容	健康・美容機器の製造、販売、輸出入
資本金	3,000 万円(ジョンソンヘルステック(台湾上場)グループ : 100%)
URL	https://www.fujiiryoki.co.jp/

本プレスリリースの製品画像は、以下 URL よりダウンロードいただけます。
<https://www.fujiiryoki.co.jp/files/news/mrlm2.zip>